


Согласовано

Советник Генерального директора

ОАО «ТЗМОИ»

 Г.В. Торопов

« » 2008г.

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «ТЗМОИ»

 Н.Г. Позднякова

« » 2008г.

АКТ

Испытания безбумажного регистратора Элметро-ВиЭР производства

ООО "Элметро Групп", г.Челяби́нск.

Комиссия в составе: главного инженера – Кольцова А.Н., начальника СКБ Пенягина В.П., зам.начальника ТО Ищенко А.В., инженера-конструктора СКБ Афанасьева А.Ю., инженера-конструктора ТО Злобин В.М. провели испытания безбумажного регистратора Элметро-ВиЭР (далее регистратор).

1 Время и место испытаний

Испытания проводились на базе испытательной лаборатории техноцентра ОАО «Тюменский завод медоборудования и инструментов» г.Тюмень в период с 21.05.07 по 14.06.08г.

2 Цель испытаний

Проверка регистратора на соответствие заявленным производителем характеристикам, ГОСТ Р 51935-2002 и возможность использования их на стерилизаторах производства ОАО «Тюменский завод медоборудования и инструментов».

3 Методы испытаний

Испытания регистратора проводились в составе стерилизатора ГПД-560-2-«ТЗМОИ».

Проводилась проверка работы стерилизатора в автоматическом режиме на программах 134⁰С, 121⁰С.

По окончании испытаний проводится анализ данных регистратора и ГОСТ Р 51935-2002 и делается вывод:

- о соответствии регистратора заявленным характеристикам;
- о соответствии ГОСТ Р 51935-2002;
- о возможности использования регистраторов на стерилизаторах производства ОАО «Тюменский завод медоборудования и инструментов».

4 Результаты испытаний

Данные полученные экспериментальным путем в виде графика приведены в Приложении.

Регистратор соответствует заявленным характеристикам.

Отклонения в показаниях регистратора и панели оператора минимальны и находятся в пределах допуска.

Распечатки удовлетворяют ГОСТ Р 51935-2002.

Выводы:

1 Технические характеристики безбумажного регистратора Элметро-ВиЭР полностью соответствуют характеристикам, указанным производителем.

2 Регистраторы Элметро-ВиЭР рекомендуется использовать в конструкции паровых стерилизаторов. При этом:

- в качестве начальных настроек для печати графиков (настройки «по умолчанию») использовать настройки представленные в Приложении;
- предусмотреть возможность изменения настроек пользователем;
- предусмотреть возможность возвращения к настройкам по умолчанию с помощью нажатия на кнопку либо любым другим удобным для пользователя способом.

3 Предпочтительный цвет корпуса безбумажного регистратора Элметро-ВиЭР – бело-серый.

Председатель комиссии:




Кольцов А.Н.


Комиссия:




Пенягин В.П.

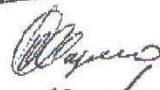

Ищенко А.В.

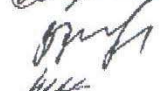

Злобин В.М.

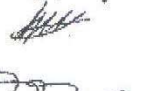

Афанасьев А.Ю.

